
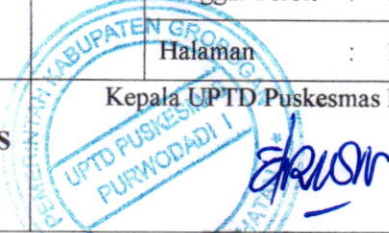
	PEMERIKSAAN VAKSIN DENGAN UJI KOCOK		
	SOP	No Dokumen : SOP / IX-UKP/ 30 / 2019	
		No Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 14 Januari 2019	
Halaman : 1/2			
	Kepala UPTD Puskesmas Purwodadi 1	Dr. ENDAH YULLI R NIP. 19740417 200604 2 019	
UPTD PUSKESMAS PURWODADI 1			

1	Pengertian	Pemeriksaan Vaksin dengan Uji Kocok adalah mengatur cara melakukan uji kocok.		
2	Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah mengetahui bila vaksin tersangka beku, menjaga kualitas pelayanan imunisasi dan menghindari KIPI.		
3	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas nomor 825 / 84 / 2019 Tentang Standar Layanan Klinis		
4	Referensi	Buku pedoman tentang penyelenggaraan imunisasi MenKes RI No 42 Tahun 2013. Permenks No. 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi		
5	Prosedur / Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa freez tag, grafik suhu lemari es, thermometer apakah pernah turun dibawah titik beku. 2. Bila freez tag berubah jadi tanda " X ". 3. Bila thermometer turun hingga titik beku ? 4. Bila salah satu jawaban " YA " lakukan Uji Kocok " (shake test). Langkah-langkah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pilih salah satu contoh dari tiap type dan batch vaksin yang pernah di curigai beku, (dekat evaporator), beri label "tersangka beku ". Bandingkan dengan vaksindari type dan batch yang sama yang sengaja dibekukan hingga beku padat seluruhnya dan diberi label " dibekukan " 2. Biarkan " dibekukan " dan " tersangka beku " mencair. 3. Kocok " dibekukan " dan " tersangka beku " bersamaan. 4. Amati " dibekukan " dan "tersangka beku", bersebelahan untuk membandingkan waktu pengendapan (5-30 menit) 5. Bila terjadi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengendapan vaksin " Tersangka baru " lambat dari " dibekukan " vaksin segera digunakan. b. Pengendapan vaksin " Tersangka Beku " sama/lebihcepat dari " dibekukan " vaksin rusak. 6. Lakukan uji kocok pada tiap vaksin yang berbeda batch dan jenis vaksin dengan control " dibekukan ' yang sesuai. 		
6	Diagram Alir (jika dibutuhkan)	Dibuatjika SOP tersebut mengandung unsur <i>emergency</i> /nyawa/keuangan		
7	Hal-hal yang diperhatikan	Suhu lemari es VVM vaksin Keadaan ciran vaksin		
8	Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program KIA 2. Program Kesling 3. Program Gizi 4. Program P2P 5. Program Promkes 6. RuangPengobatanUmum 		
9	Dokumen terkait	Dokumen yang berhubungan dengan prosedur/proses kerja		
10.	Rekaman Historis	No	Yang diubah	Isi perubahan
		1	Komponen SOP	Penambahan komponen sop : - Hal- hal yng perlu
				Tanggal mulai berlaku 14 Januari 2019

UPTD PUSKESMAS PURWODADI 1	PEMERIKSAAN VAKSIN DENGAN UJI KOCOK		<u>Dr. ENDAH YULI. R</u> NIP. 19740417 200604 2 019
	SOP	No Dokumen : SOP / IX-UKP/ 30 / 2019	
		No Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 14 Januari 2019	
	Halaman : 2/2		

			diperhatikan - Doumen terkait	
	2	Kepala puskesmas	Dari Dr. Rini Ariyanti menjadi Dr. Endah Yuli Ratnawati	14 Januari 2019